

Série Gymna G2

Support starts here



TABLES DE MASSAGE



Série Gymna G2

gymna[®]

www.gymna.com

Série Gymna G2



Bienvenue chez Gymna

Les tables de massage et d'examen de Gymna sont une référence depuis déjà plus de 35 ans dans le monde médical. Grâce à la conception ergonomique, au standard professionnel élevé et à l'utilisation des meilleurs matériaux, les tables Gymna ont une solide réputation dans le monde.

Gymna est synonyme de qualité optimale, de fonctionnalité, de design unique et de facilité de commande.



Série G2

Les tables d'examen et de massage Gymna G2 correspondent parfaitement aux valeurs traditionnelles de l'entreprise ; un design original et pratique avec une finition et des composants de qualité optimale.

Choisissez le modèle convenant le mieux à vos activités professionnelles et utilisez les options pour personnaliser entièrement votre table.

Votre table Gymna G2 garantit des années de fonctionnement sans problème et est le partenaire le plus fiable dans votre cabinet, jour après jour.



Institut de soins
Physiothérapie
Ergothérapie

Soins sportifs

Centre de bien-être

Médecin généraliste

Salon de beauté


Physiologie du sport

Soins de la peau



G2 Duo

La base par excellence pour un accueil confortable et sûr de vos clients. Il peut être entièrement descendu jusqu'à hauteur de chaise, permettant de s'y installer très facilement. Le grand dossier soutient une position assise. Votre client est impliqué de manière optimale dans le traitement.

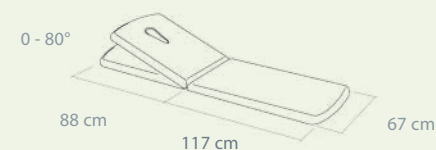

G2 sur mesure



Mobile

Votre table G2 peut être équipée de quatre roulettes pivotantes. La table peut ainsi être facilement déplacée pour une utilisation en différents endroits. Le nettoyage en est aussi facilité. Lorsque les roues ne sont pas utilisées, la table G2 est bien calée sur des pieds antidérapants spéciaux Elastolan®.




Indépendant

La pompe à pied hydraulique vous permet d'être indépendant du réseau électrique. Vous pouvez ainsi régler la hauteur de la table G2 partout et à tout moment.

G2 Duoplus


Solution idéale pour le traitement et le massage en position couchée. La tête est réglable très facilement vers le haut et vers le bas avec un vérin pneumatique.

La table peut être équipée d'accoudoirs pour une détente optimale en position sur le ventre.

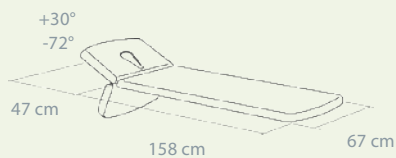

G2 Trio

Véritable table complète de la série G2 de Gymna. Grâce à la tête et au dossier réglables, les positions couchées et assises sont parfaitement combinées. Multiple par sa simplicité.

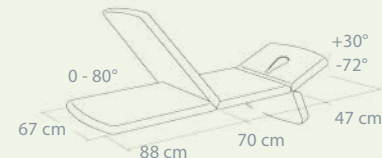

Hygiène

Tout le monde apprécie d'être sur une table propre : du papier hygiénique convient parfaitement à cette fin. Les supports de rouleau peuvent être fixés au dossier ou sur le plan jambier, selon la table de votre choix. Les supports sont disponibles pour des rouleaux de papier de 50 ou 60 cm.



Facilité de commande

Ne cherchez plus jamais la commande ! Avec la cadre de commande périphérique de Gymna, vous réglez la hauteur de quatre côtés de la table. Le système est bien dissimulé et très facile à manipuler. Pas de partie saillante gênante, évitant une commande par accident (sécurité optimale).

Vue d'ensemble

Coussins

Les coussins sont disponibles en 11 couleurs. Le revêtement résistant est ignifuge, résiste au sang et à l'urine et est facile à nettoyer et désinfecter.

Style :



Carbon Chrome Pacific Ivory



Sahara Marble Havana Terracotta

Fashion :



Atoll Mandarin Agave

	G2 Duo	G2 Duoplus	G2 Trio
Réglage électrique de la hauteur avec commande au pied	■	■	■
Tête réglable avec vérin pneumatique		■	■
Réglable dossier avec vérin pneumatique	■		■
Convient pour une utilisation avec lève-patient ¹⁾	■	■	■
Pieds antidérapants spéciaux contre les déplacements	■	■	■
Choix entre 11 couleurs de revêtement ²⁾	■	■	■
Convient à un support de rouleau de papier sur le dossier	■		■
Convient à un support de rouleau de papier sur le plan jambier	■	■	
Cadre de commande périphérique Gymna	○	○	○
Commande manuelle	○	○	○
Réglage hydraulique de la hauteur	○	○	○
Ensemble de 4 roulettes pivotantes	○	○	○
Section de la tête ou du dos avec ouverture pour le nez	○	○	○
Tête avec accoudoirs réglables ³⁾		○	○
Coussins en couleur non standard	○	○	○
Support de rouleau de papier 50 cm	○	○	○
Support de rouleau de papier 60 cm	○	○	○
Housses en tissu éponge (différentes couleurs)	○	○	○
Protection au niveau des pieds	○	○	○

■ = standard
○ = facultif

Données techniques

Dimensions des coussins : 205 x 67 cm
 Réglage hauteur : 50-100 cm
 Capacité de levage max. : 200 kg
 Poids de la table : env. 80 kg
 Catégorie d'isolation : II
 Classification appareil : I
 Tension : 230 V~, 50/60 Hz, 2.0 A
 120 V~, 60 Hz, 1.7 A
 Garantie : 3 ans
 (revêtement 1 an)

La série G2 de Gymna satisfait aux exigences essentielles de la directive relative aux dispositifs médicaux de la Commission européenne (93/42/CEE).



¹⁾ L'espace libre sous le châssis est de 15 cm. Lève-patient non combinable avec commande circulaire Gymna.

²⁾ Les couleurs imprimées ne donnent seulement qu'une impression des couleurs réelles.

³⁾ Ouverture pour le nez toujours incluse.



Contrôle manuel

Choisissez la commande manuelle si vous préférez garder le contrôle manuel du réglage de la hauteur.



Soutien optimal

Vous pouvez ajouter une ouverture pour le nez à la section de la tête G2 pour un meilleur confort lors de la position couchée sur le ventre. Cette option inclut un petit coussin.



Confort

Choisissez les accoudoirs facultatifs pour la G2 Duoplus ou Trio. Ils garantissent une position de détente optimale du cou, des épaules et des bras lors des traitements sur le ventre. Réglage très facile.



« Gymna,
mon meilleur investissement ! »

Série Gymna G2



Modèle communautaire

Cryothérapie



Diathermie



Thérapie par ondes de choc



Whole Body Vibration



Tables de massage



Electrothérapie



Active Motion



Votre distributeur :

www.gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel : +32 (0)89 510 510 | Fax : +32 (0)89 510 511